

SOX606

索氏提取仪 (脂肪测定仪)

SOX606 索氏提取仪是根据索氏抽提原理，对脂肪等有机物进行萃取分离的仪器。仪器具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及 CH 标准热萃取等五种萃取方式；SOX606 索氏提取仪采用整体嵌入式金属加热，升温快，效果好，功耗低。安卓风格界面设计，竖屏外置壁挂式控制器，使操作更加简便快捷；进出水路全方位温度监控与流量控制，更加环保与节约；内置乙醚泄漏检测装置有效防止空气污染，充分保障了实验的安全性。SOX606 索氏提取仪广泛应用于农业、食品、环境及工业等不同的领域的脂肪萃取，也可应用于药品、土壤、污泥、清洁剂等物质中的可溶性有机化合物的萃取。

主要功能和特点

- 全部有机溶剂均可使用，包括苯类、醚类、酮类等，满足各种有机溶剂的使用条件
- 采用全自动标准索氏萃取，全通道为玻璃与四氟材质，有效避免杂质的引入，准确性高
- 采用一键开始与暂停操作，实验过程掌控灵活
- 外置壁挂型控制器，方便灵活，简单快捷
- 竖屏面板，安卓风格界面，操作简约且人性化
- 五种萃取方式，满足不同客户萃取需求
- 预设常用试剂选项，高频次实验一键轻松搞定
- 整体嵌入式金属加热，升温更快，效率更高，功耗更低
- 进出水路温度监控与流量控制，配合冷凝水有无实时监测，保证有机蒸气冷凝回流无泄漏的效果下，节约水资源
- 仪器异常实时监控系統配合乙醚泄露报警，时刻确保实验的顺利进行与人员安全
- 具有高效的溶剂回收系统，有效减少试剂的浪费



索氏提取仪

Soxhlet Extractor



全溶剂通用仪器

SOX606 索氏提取仪采用全玻璃与四氟材质作为实验通道，全溶剂通用的密封垫在保证通道密封性的同时，也可耐受各类有机试剂，满足各类用户在不同领域的应用要求。

整体嵌入式金属加热

SOX606 索氏提取仪采用整体嵌入式金属加热，升温更快速，平稳性更好，能耗更低。

冷凝水全方位监控

SOX606 索氏提取仪采用进出水路全方位温度监控与流量控制，在保证冷凝充分的前提下大幅度减少冷凝水的浪费，既可靠又节约水资源。

安卓风格界面

SOX606 索氏提取仪采用竖屏面板，使用安卓风格界面，控制端轻松自由，可使用户在简约且人性化的操作中轻松完成整个实验。


符合标准

GB 5009.6-2025 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定

GB/T 6433-2025 饲料中粗脂肪的测定

应用领域

广泛应用于农业、食品、环境及工业等领域。是食品、油料、饲料等行业脂肪测定的理想仪器；也可应用于药品等物质中的可溶性有机化合物的萃取。

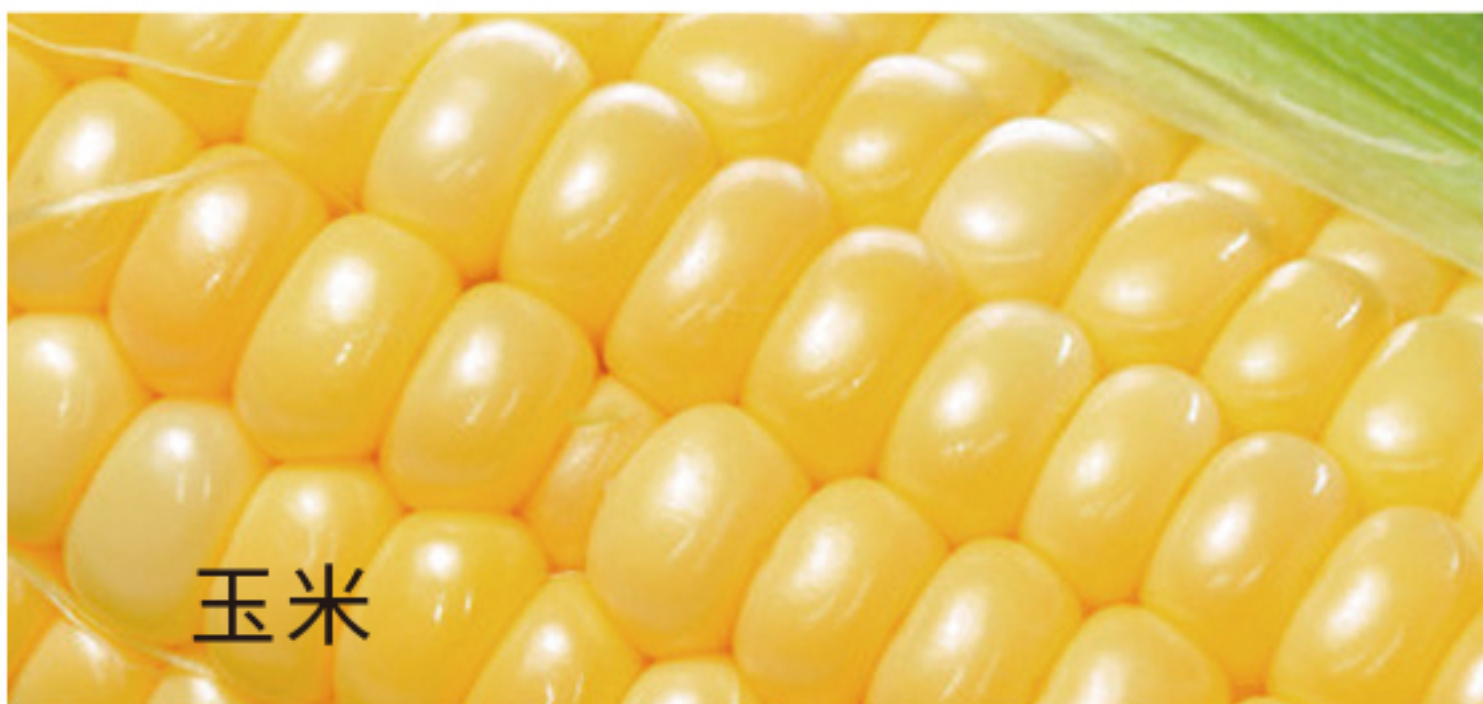

技术指标	
控温范围	室温+5℃~300℃
测定范围	0.1%~100%
控温精度	±1℃
重复性误差	1%
测定样品重量	0.5g~15g
处理能力	6个/批
加热杯体积	150mL
溶剂回收率	≥85%
测定时间	较传统方法缩短20%~80%
电源	220V AC±10% 50Hz
额定功率	2.0KW
外形尺寸（长×宽×高）	650mm×380mm×720mm
净重	50kg